


% <	μm [ø]	CV[%]	M53690	M53691
10,0	17,16	1,50	17,42	16,9
50,0	47,29	0,04	47,31	47,27
90,0	86,69	0,04	86,65	86,73

< μm	% [ø]	CV[%]	M53690	M53691
0,10	0,0	0,00	0	0
0,50	0,2	4,15	0,2	0,2
1,00	1,0	1,01	1	1
2,00	2,6	0,65	2,6	2,6
5,00	4,2	4,29	4,1	4,4
10,00	5,4	4,77	5,1	5,6
20,00	12,7	1,63	12,5	12,9
30,00	24,7	0,48	24,6	24,8
40,00	39,2	0,14	39,1	39,2
50,00	53,9	0,04	53,9	53,9
60,00	67,1	0,00	67,1	67,1
80,00	86,0	0,02	86	85,9
100,00	95,2	0,03	95,3	95,2
120,00	98,9	0,03	98,9	98,8
150,00	100,0	0,01	100	99,9

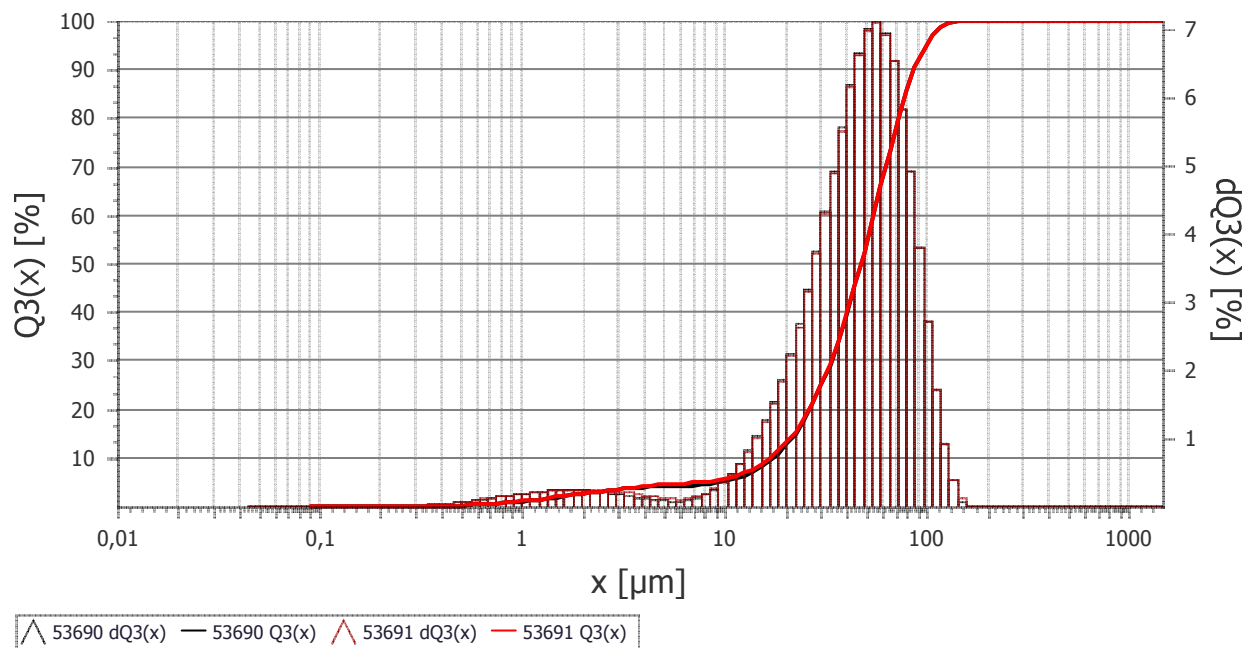

REA-Gips


S120149

Mess.-Nr. 53690 Datum Montag, 24 September 2012 11:21 Bearbeitungs- Nr.:
 Material REA-Gips **S120149**
 Bemerkung mechanisch dispergiert in IPA (ohne Ultraschall), gemessen mit SVDU

Berechnung Fraunhofer broad TradeOff 1,000000e+003
 Scans 100 Scans Grobbereich 100 Messkanäle 102 Strahlabsorption 12,00 %
 Feinbereich
 Messbereich 0,08 [μm] - 2000 Dispergiereinheit: SVDU

%	< μm
5	9,719
10	17,418
15	22,386
20	26,536
25	30,286
30	33,807
40	40,580
50	47,306
60	54,421
70	62,515
80	72,311
90	86,654
95	99,005
98	112,789
99	121,512

%	< μm
0,0	0,10
0,2	0,50
1,0	1,00
2,6	2,00
4,1	5,00
5,1	10,00
12,5	20,00
24,6	30,00
39,1	40,00
53,9	50,00
67,1	60,00
86,0	80,00
95,3	100,00
100,0	150,00
100,0	200,00

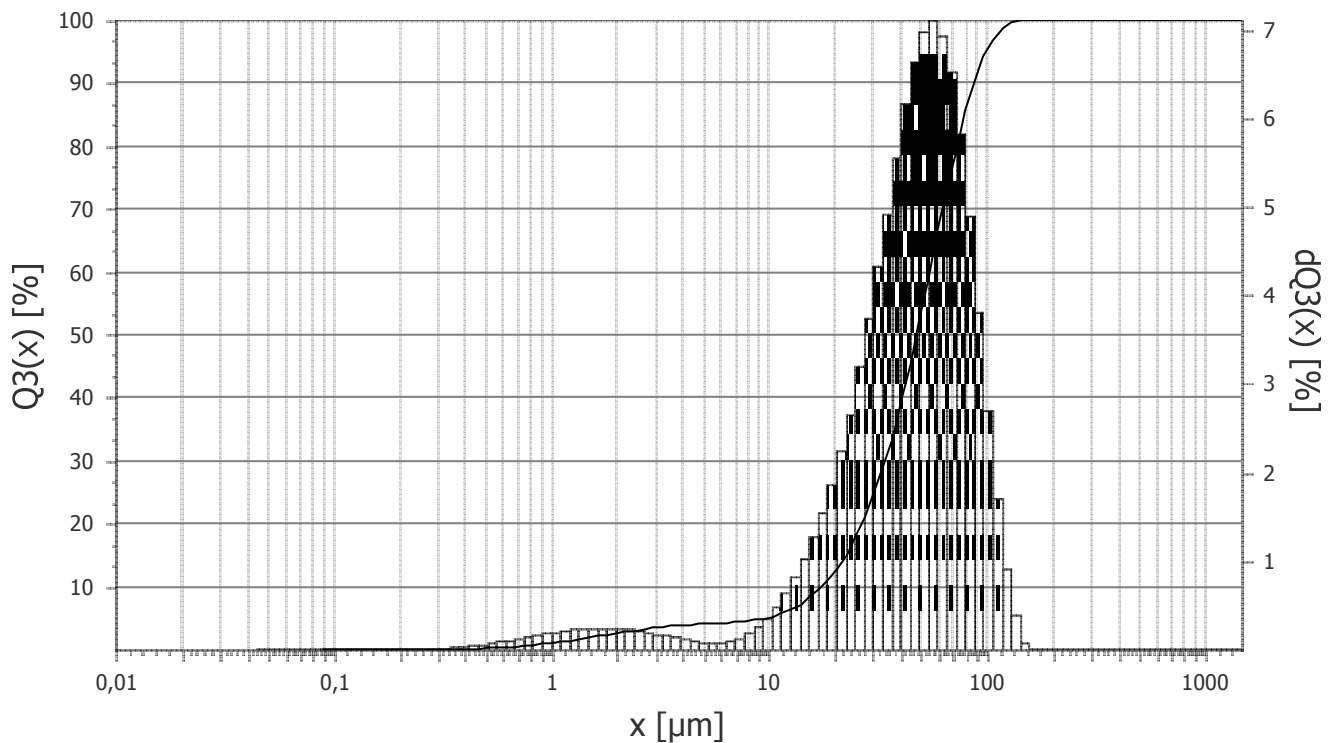


▲ 53690 dQ3(x) — 53690 Q3(x)

Mess.-Nr. 53691 **Datum** Montag, 24 September 2012 11:22 **Bearbeitungs- Nr.:**
Material REA-Gips **S120149**
Bemerkung mechanisch dispergiert in IPA (ohne Ultraschall), gemessen mit SVDU

Berechnung Fraunhofer broad **TradeOff** 1,000000e+003
Scans 100 **Scans** 100 **Messkanäle** 102 **Strahlabsorption** 12,00 %
Feinbereich **Grobbereich**
Messbereich 0,08 [μm] - 2000 **Dispergiereinheit:** SVDU

%	< μm
5	7,946
10	16,902
15	22,037
20	26,298
25	30,120
30	33,682
40	40,511
50	47,270
60	54,408
70	62,526
80	72,354
90	86,728
95	99,182
98	113,125
99	122,214

%	< μm
0,2	0,50
1,0	1,00
2,6	2,00
4,4	5,00
5,6	10,00
12,9	20,00
24,8	30,00
39,2	40,00
53,9	50,00
67,1	60,00
85,9	80,00
95,2	100,00
99,9	150,00
100,0	200,00

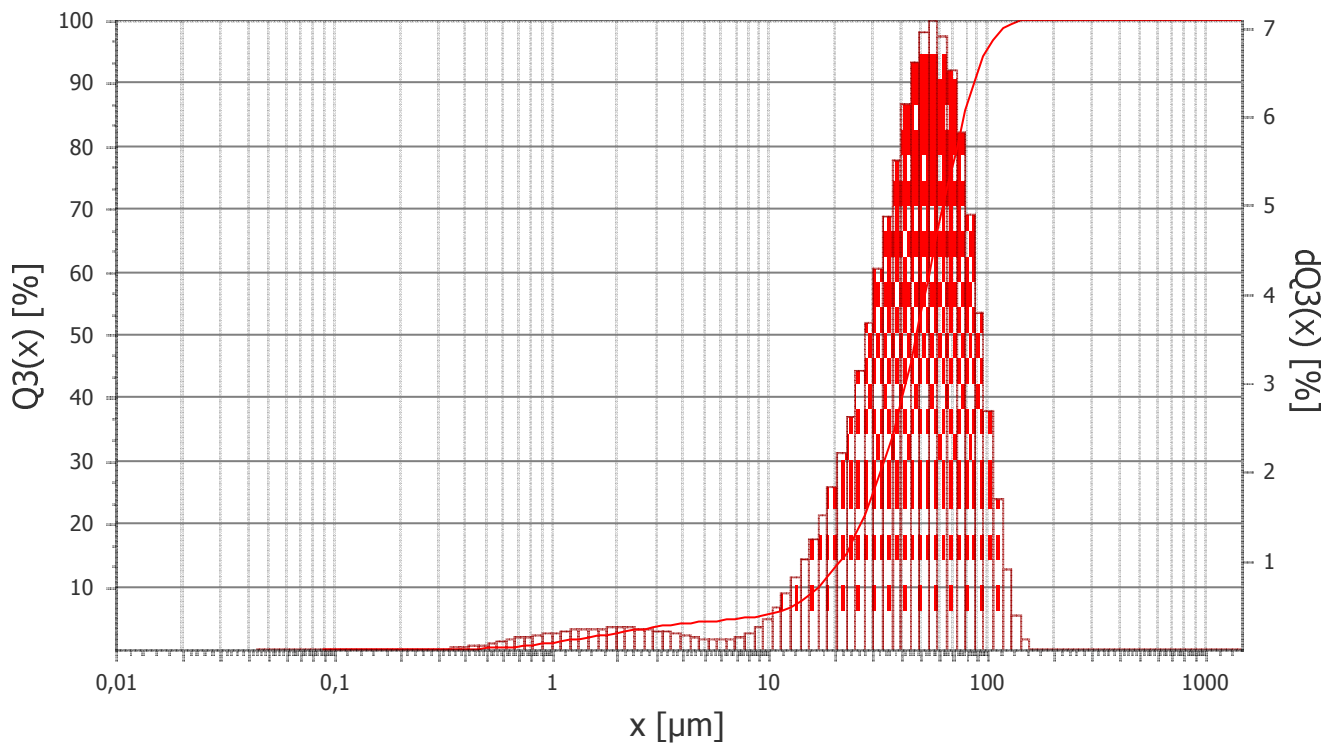

 53691 dQ3(x) — 53691 Q3(x)